



## 61 CL AE NI 012

Col Anti Esc NINFA 12-MF+(5+7)cm


Colchão de prevenção de úlceras por pressão, articulável, não reversível. Recomendado para uso domiciliário e institucional, está indicado para utilizadores com risco moderado de desenvolver úlceras por pressão (escala de Braden).

Base em espuma de soja D35Kg/m<sup>3</sup> com 70mm (Ninfa 012) ou 90mm (Ninfa 014) de altura, o que proporciona uma boa base de sustentação. Camada superior em espuma viscoelástica (memory foam de soja) densidade 50kg/m<sup>3</sup> com 50mm de altura. Moldável e aconchegante, permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea e consequente prevenção. Adapta-se completamente ao formato do corpo proporcionando uma sensação de leveza que se traduz num sono extremamente repousante.

Capa bielástica maleável (permite obter o máximo benefício das propriedades das espumas), impermeável aos líquidos, permeável aos gases, com tratamento Sanitized o qual confere propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti ácaros. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. Possui ainda lábio protetor do fecho, o que previne a entrada de resíduos e líquidos para o interior do colchão. Possibilidade de fabrico por medida. Opcional: capa com costuras vulcanizadas.

## NINFA

Ninfa 12	1900x900x120mm
Ninfa 14	1900x900x140mm
Ninfa 12 casal	2000x1500x120mm
Ninfa 14 casal	2000x1500x140mm
Peso máximo utilizador	85Kg

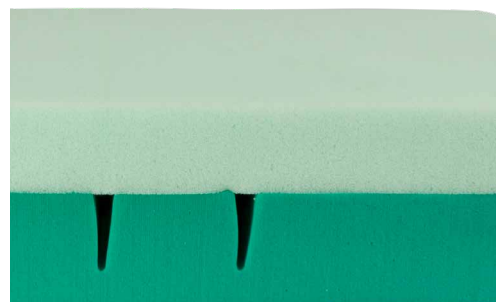

Colchão amigo do ambiente fabricado com espumas ecológicas (soja), diminuindo significativamente a quantidade de petróleo usado no seu fabrico



Capa bielástica maleável



Lábio protetor do fecho