

# Ortóteses para a mão em alumínio



1. EM FLEXÃO



2. EM EXTENSÃO

## TALA EM POSIÇÕES DIFERENTES

Entre as 2 posições podemos obter posições intermédias incluindo a posição funcional, manipulando manualmente a tala maleável em alumínio, obtendo ângulos e posturas diferentes.



OM6101  
Video



Ref.: OM6101D  
DIR

Ref.: OM6101I  
ESQ


## ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE PUNHO, MÃO E DEDOS

TAMANHOS	1	2	3
LARGURA CM	5-7	7-9	9-11
COMPRIMENTO CM	31'5	34	36'5



### Componentes:

Tala + separador interdigital.

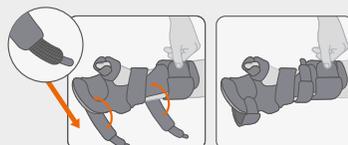

### FIXAÇÃO DE CORREIAS

Correias de fixação acolchoadas e com micro-velcro. Permite alterar o posicionamento do punho, mão e dedos.

### Características:

Confeccionada com uma alma em alumínio moldável para permitir a correcta adaptação e posicionamento do punho, mão e dedos. Almofadamento interno para maior conforto e forro de turco absorvente para evitar a sudação. Forro exterior de velour. Tiras de aperto muito almofadadas e fecho em micro-velcro. Permite adaptar o posicionamento de punho, mão e dedos, de acordo com o necessário.

### Efeitos:

Tem por função conseguir a imobilização e alinhamento da articulação do pulso, mão e dedos, mantendo-os com uma ligeira flexão e abdução do polegar, podendo variar o ângulo de posicionamento.

### Indicações:

- Lesões neurológicas de origem central ou periféricas (paralisias espasmódicas e flácidas); como tratamento na prevenção de deformações de origem reumática, bem como no alívio da dor e diminuição de inflamação, síndrome do canal cárpico.

Cor: ■ Preto.



## ACESSÓRIOS



Ref.: OM001

### SEPARADOR INTERDIGITAL

Permite a separação e o alinhamento dos dedos.

TAMANHOS UNIVERSAL 1 UNIDADE



Ref.: OM002I (ESQ)

### KIT DE 3 CORREIAS PARA TALA OM6101I

Está disponível um kit de 3 correias que incluem:

1 correia para o polegar, 1 correia para os outros dedos e 1 correia para o antebraço.

Ref.: OM002D (DIR)

### KIT DE 3 CORREIAS PARA TALA OM6101D

TAMANHOS UNIVERSAL